



Produits de maintien de la stérilité

Protéger les surfaces sensibles pour le traitement aseptique

Il est essentiel de protéger les surfaces en contact avec le produit contre la contamination pendant le traitement aseptique pour maintenir la stérilité du produit et assurer la sécurité du patient. Pour répondre à ce besoin, STERIS propose une large gamme de produits de maintien de la stérilité, notamment des emballages de stérilisation, des outils de salle blanche pré-stérilisés, des vêtements de salle blanche spécialisés et des housses de protection d'équipement.

Systèmes d'emballage pour la stérilisation

Le système d'emballage pour la stérilisation de STERIS consiste en une combinaison optimale de sacs, pochettes et housses pour autoclave, conçus spécialement pour votre processus. De la cuvette de bouchage la plus grande et la plus encombrante à la plus petite et la plus délicate aiguille de remplissage, nous vous recommanderons la meilleure configuration d'emballage pour votre processus de stérilisation unique. Nous proposons des designs avérés qui prennent en compte l'emballage des pièces, le chargement en autoclave, le maintien stérile, le transport, le déballage et la présentation aseptique.

Outils, sacs en polyéthylène et accessoires pour salle blanche pré-stérilisés

Pour simplifier la gestion de vos pièces en salle blanche et réduire le besoin d'autoclavage, STERIS fournit une gamme d'articles pré-stérilisés pour votre confort. Que vous ayez besoin d'une paire de pinces stériles pour manipuler des flacons ou d'un jeu de housses stériles pour seaux afin de réduire la fréquence d'autoclavage de vos seaux, STERIS peut vous aider à concevoir une solution qui répond à vos besoins. Nous proposons également différentes configurations d'emballage pour faciliter au mieux le transfert du matériel dans votre établissement et dans la salle blanche.

Sacs de stérilisation

Les sacs de stérilisation de STERIS sont fabriqués à partir d'un matériau non tissé en oléfine spunbond (filée-liée) de qualité flexible Tyvek®. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles, et peuvent être fermés avec un cordon de serrage en option ou avec une thermosoudeuse. Les sachets de stérilisation sont particulièrement bien adaptés aux pièces de grande taille, lourdes ou de forme irrégulière.



Pochettes de stérilisation avec film

Les pochettes de stérilisation sont constituées de couches de Tyvek et de film, formant une pochette respirante adaptée à la stérilisation à la vapeur tout en offrant une vue claire du contenu à l'intérieur. Les options comprennent une bande auto-adhésive pour la fermeture de la pochette et un modèle d'ouverture par pelage en chevron pour une présentation aseptique améliorée.



Housses élastiques pour cuvettes | Housses pour bunkers | Housses pour trémies

Les housses élastiques STERIS sont un moyen très simple mais très efficace de protéger les surfaces en contact avec le produit des cuvettes, des bunkers et des trémies. L'ouverture élastique les rend faciles à mettre en place, faciles à enlever et permet de les laisser en place lorsque la cuvette est installée sur la ligne de remplissage.



Mini housses élastiques

Couvrez facilement les petites ouvertures avec les mini housses de STERIS. Fabriquées à partir d'un matériau Tyvek flexible avec un élastique attaché, les mini housses peuvent être rapidement manipulées sur ou en dehors des extrémités ouvertes des tuyaux de traitement, des vannes, des raccords, des orifices de réservoir, des béciers et des bonbonnes.



Housses de protection d'équipement

Les housses de protection d'équipement STERIS peuvent être utilisées pour couvrir les réservoirs, les racks, les étagères, les palettes, les chariots et autres équipements dans les zones de production et de stockage. L'utilisation des housses de protection d'équipement fournit une barrière de protection supplémentaire entre votre équipement et l'environnement, et peut aider à assurer la conformité aux BPF.




Vêtements spéciaux pour salles blanches

STERIS fournit des combinaisons, des blouses intégrales et des kits de vêtements personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de vos procédures d'habillage. Notre gamme de masques spéciaux comprend des options de prévention du brouillard et différentes options de fermeture.



Outils de salle blanche pré-stérilisés

Lorsque les outils ou les instruments nécessaires en salle blanche ne peuvent pas être stérilisés à l'autoclave en raison de problèmes de compatibilité des matériaux ou de capacité de l'autoclave, STERIS peut vous fournir des outils pré-stérilisés, tels que des stylos, des marqueurs, des pinces, des ciseaux, etc. Nous pouvons vous aider à trouver une variété d'articles et vous fournir l'emballage, la stérilisation et la documentation nécessaires.

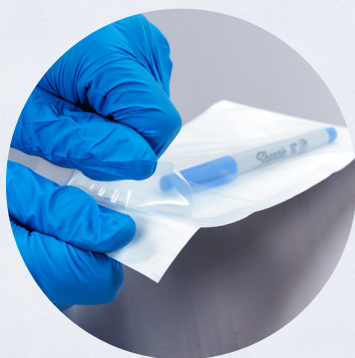

Sacs en polyéthylène à usage général

STERIS propose une gamme de sacs en poly pour répondre aux besoins des salles blanches en matière d'élimination des déchets, de nettoyage, de transport et de stockage. Nous fournissons une variété de sacs poubelle, de sacs pour seaux, de sacs à risque biologique, de sacs à fermeture éclair et de sacs en poly à usage général.



Sacs de maintien de la stérilité

Les sacs de maintien de la stérilité constituent un moyen pratique et rentable de protéger les pièces après stérilisation pendant le transport et le stockage. Les sacs de maintien de la stérilité STERIS sont disponibles en plusieurs tailles, sont munis d'une bande auto-adhésive et s'ouvrent facilement sans outil de coupe.



La sélection de l'emballage de stérilisation optimal et d'autres produits de maintien de la stérilité constitue une partie essentielle dans le cadre de vos opérations aseptiques. Avec plus de 100 ans d'expertise dans le domaine de la stérilisation et du contrôle de la contamination, STERIS apporte le meilleur soutien technique et les meilleures consultations de l'industrie pour vous aider à sélectionner et valider les bons produits pour votre programme de contrôle de la contamination.